ΚΩΔΙΚΌΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ : SYSZLTJJPJJDI3Z20V0



VEVOR Σετ Απόσταξης Αιθέριων Ελαίων VEVOR 500ml, 28 τεμ. SYSZLTJJPJJDI3Z20V0

ΜΟΝΤΕΛΟ: YHEO-3

ΜΟΝΤΕΛΟ: YHEO-3

Αυτές είναι οι πρωτότυπες οδηγίες. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες του εγχειριδίου πριν από τη χρήση. Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου χρήστη. Η εμφάνιση του προϊόντος καθορίζεται από το προϊόν που παραλάβατε. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μη λάβετε ξεχωριστή ενημέρωση σε περίπτωση τεχνολογικών ή λογισμικών αναβαθμίσεων του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε το παρόν υλικό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Προφυλάξεις κατά τη συναρμολόγηση

1. Συναρμολογήστε το προϊόν αποκλειστικά σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους.
2. Κατά τη συναρμολόγηση φοράτε προστατευτικά γυαλιά και ανθεκτικά γάντια εργασίας.
3. Διατηρείτε τον χώρο συναρμολόγησης καθαρό και καλά φωτισμένο.
4. Κρατάτε τρίτους μακριά από τον χώρο κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.
5. Μην πραγματοποιείτε συναρμολόγηση όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων.
6. Οι δυνατότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν έχει συναρμολογηθεί σωστά και πλήρως.
7. Συναρμολογήστε το προϊόν σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, ικανή να υποστηρίζει με ασφάλεια τη συσκευή εργαστηριακής απόσταξης.
8. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα των επόμενων σελίδων, ανατρέξτε στο διάγραμμα συναρμολόγησης του εγχειριδίου. Αποσυσκευάστε και διαχωρίστε όλα τα εξαρτήματα σε καθαρό χώρο εργασίας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

9. ΜΗΝ ΚΑΘΕΣΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
10. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με αυτό ή κοντά σε αυτό.
11. Μην υπερβαίνετε τα επιτρεπόμενα όρια φορτίου.
12. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε επίπεδη, οριζόντια, σκληρή και λεία επιφάνεια, ικανή να υποστηρίζει με ασφάλεια την πλήρως συναρμολογημένη συσκευή εργαστηριακής απόσταξης.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν αποκλειστικά για την προβλεπόμενη χρήση του.

14. Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχουν χαλαρά ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
15. Το προϊόν συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και τους κανονισμούς. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους εφαρμοστέους κανονισμούς και η λειτουργία της πρέπει να γίνεται μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού.
16. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
17. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
18. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
19. Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως περιβάλλοντα γραφείων και αγροικίες.
20. Φυλάσσετε το προϊόν σωστά. Πριν από τη χρήση ελέγχετε εάν παρουσιάζει οποιαδήποτε ανωμαλία. Εάν διαπιστωθεί ανωμαλία, διακόψτε τη χρήση.
21. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση του. Η λανθασμένη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το μοντέλο. Τα γυάλινα εξαρτήματα πρέπει πάντοτε να χειρίζονται με προσοχή. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.


Ονομασία εξαρτήματος	Ποσότητα	Περιγραφή
Σφαιρική φιάλη	1	500 ml
Σπειροειδής συμπυκνωτής	1	-
Αχλαδόσχημη διαχωριστική χοάνη	1	125 ml
Κωνική φιάλη	1	100 ml
Γυάλινο πώμα	2	19#
Ποτήρι ζέσεως	1	100 ml
Σταγονόμετρο με ελαστική κεφαλή	1	Κόκκινη ελαστική κεφαλή
Λύχνος αλκοόλης	1	150 ml
Θερμόμετρο	1	100 °C
Ελαστικό πώμα	4	-
Σωλήνας λάτεξ	1	2 m
Γράσο κενού	1	Βαζελίνη
Χαρτί μέτρησης pH	1	-
Βούρτσα φιάλης	1	Μικρό μέγεθος
Μεταλλική βάση στήριξης	2	Με ράβδο στήριξης 40 cm
Σφιγκτήρας φιάλης	2	-
Σταυρωτός σφιγκτήρας	2	-
Καμπύλος σωλήνας εξόδου	1	-
Κυκλικός δακτύλιος	2	1 × 5,1 cm και 1 × 7,3 cm
Πλέγμα θέρμανσης	1	-

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Συναρμολογήστε τη μεταλλική βάση στήριξης.




2. Τοποθετήστε τον λύχνο αλκοόλης.

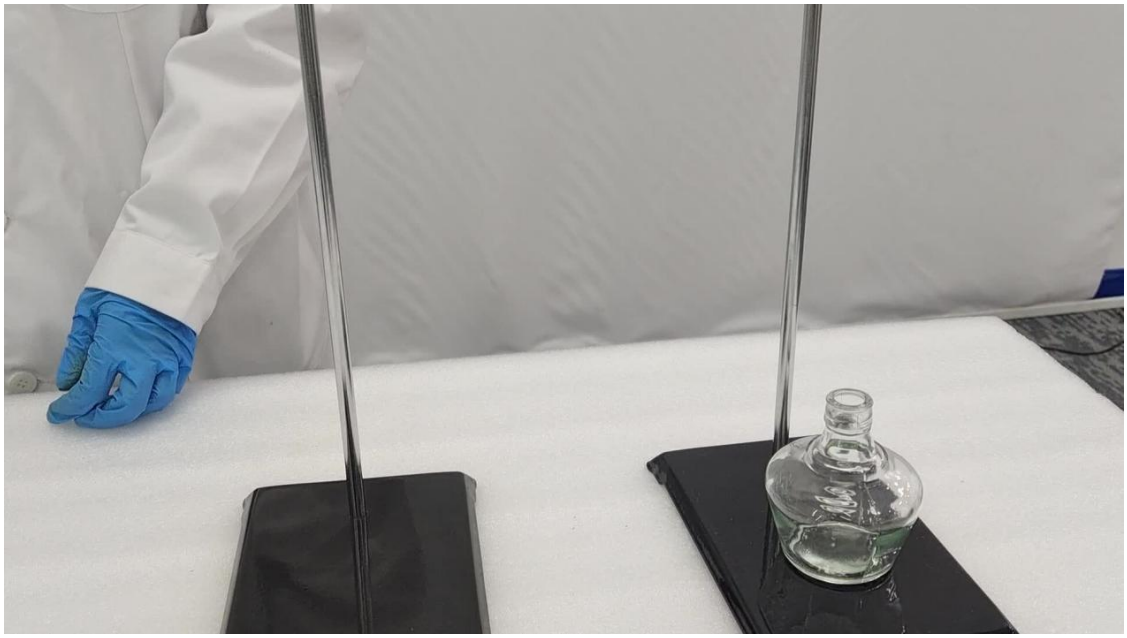


3. Τοποθετήστε τον κυκλικό δακτύλιο.

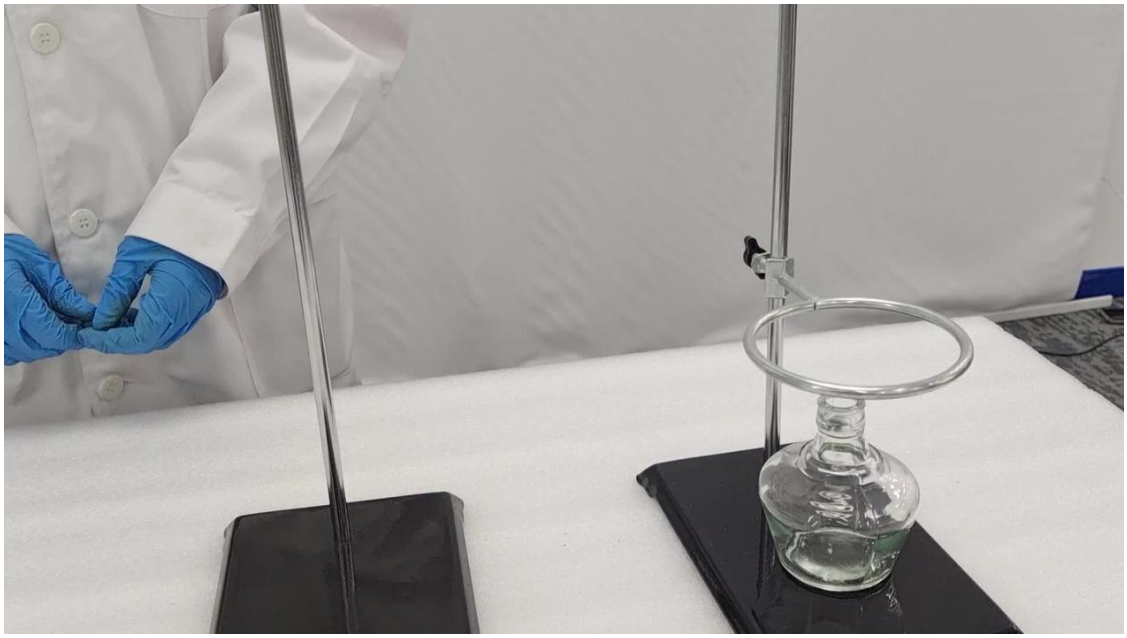


4. Τοποθετήστε το πλέγμα θέρμανσης επάνω στον κυκλικό δακτύλιο και εγκαταστήστε τον σταυρωτό σφιγκτήρα και τον σφιγκτήρα φιάλης στο κατάλληλο ύψος.

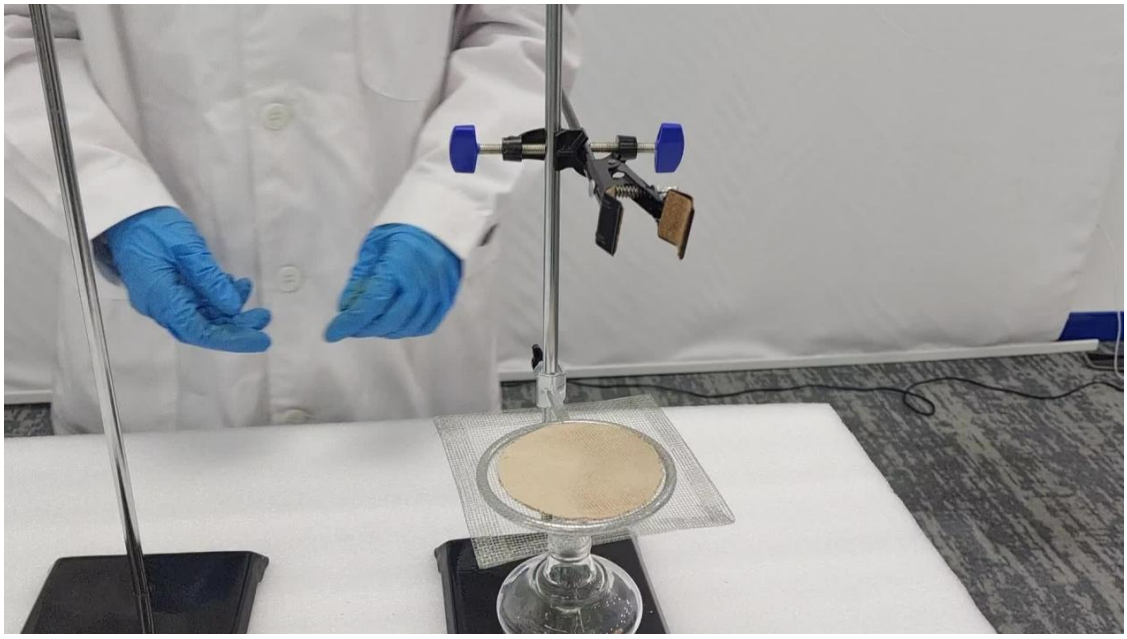


5. Τοποθετήστε τη φιάλη και εγκαταστήστε τον σταυρωτό σφιγκτήρα στο κατάλληλο ύψος της δεύτερης μεταλλικής βάσης στήριξης.

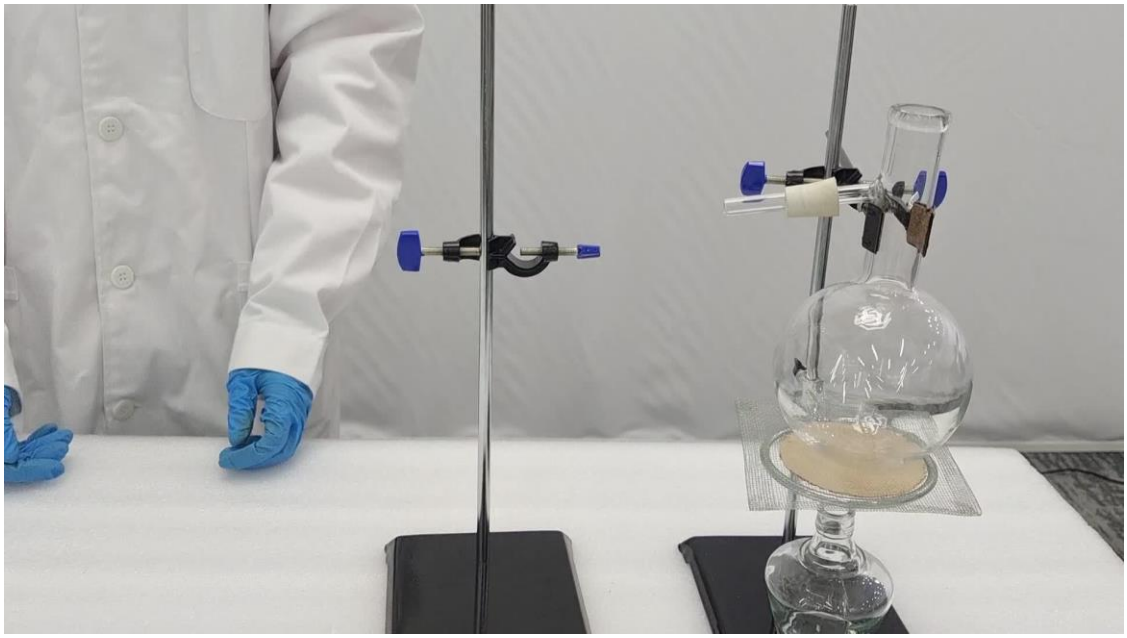

6. Τοποθετήστε τον σπειροειδή συμπυκνωτή και στερεώστε τον με τον σφιγκτήρα φιάλης.

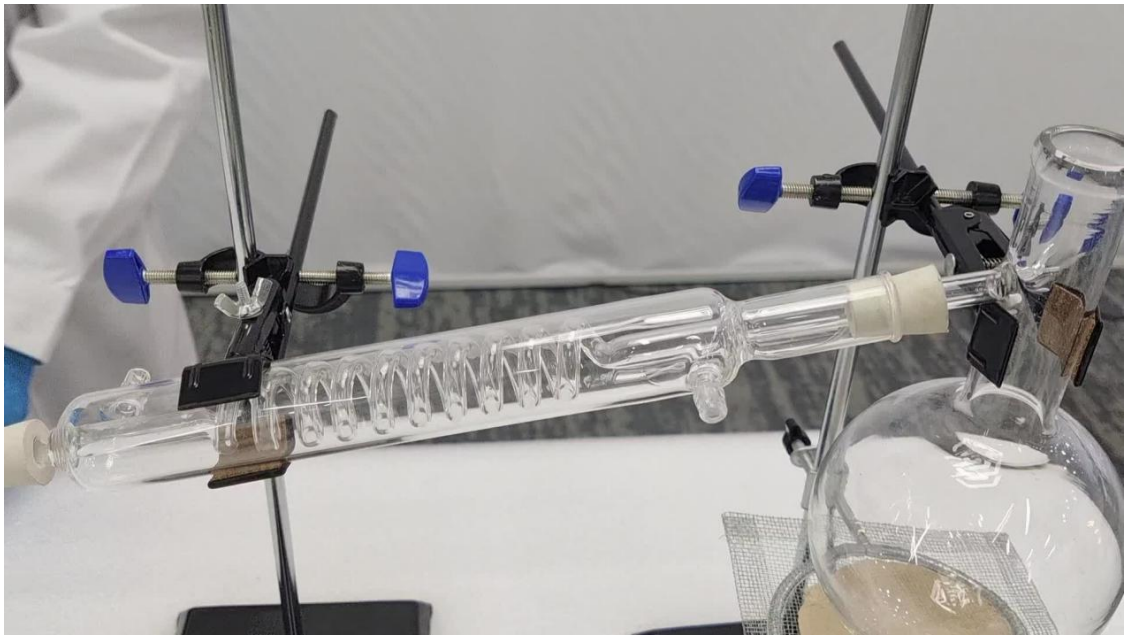


7. Τοποθετήστε τον καμπύλο σωλήνα εξόδου και τοποθετήστε την κωνική φιάλη κάτω από την έξοδό του.

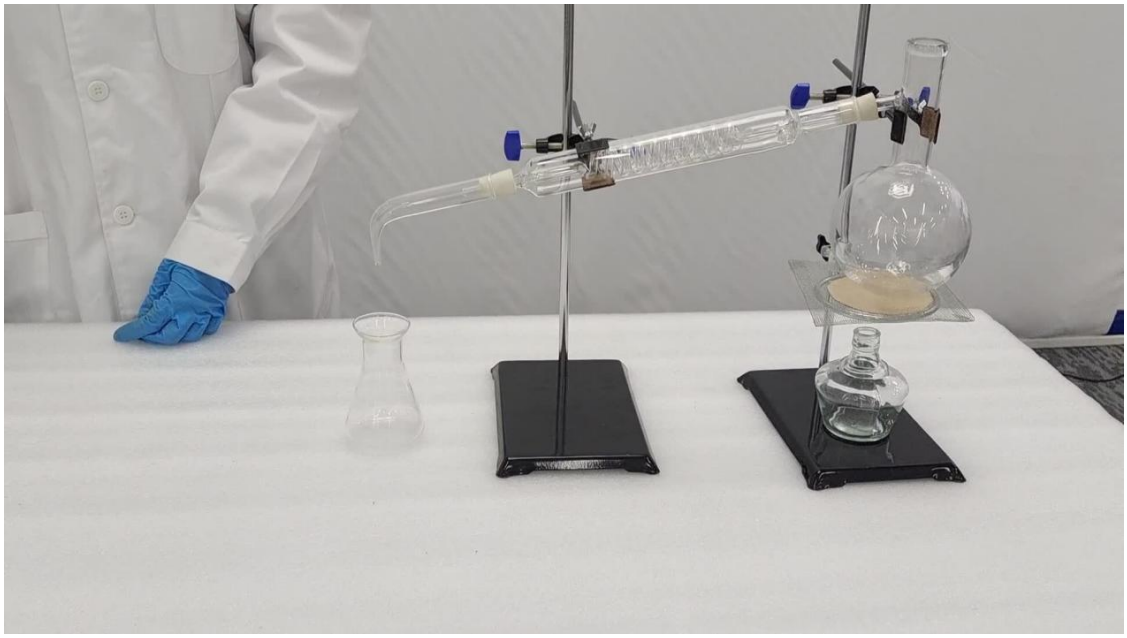

8. Τοποθετήστε τον κυκλικό δακτύλιο στο κατάλληλο ύψος της μεταλλικής βάσης στήριξης. Τοποθετήστε επάνω του την αχλαδόσχημη διαχωριστική χοάνη και στη συνέχεια το ποτήρι ζέσεως κάτω από την έξοδο της χοάνης.



9. Περάστε το θερμόμετρο μέσα από το ελαστικό πώμα και τοποθετήστε το πώμα στο στόμιο της φιάλης.

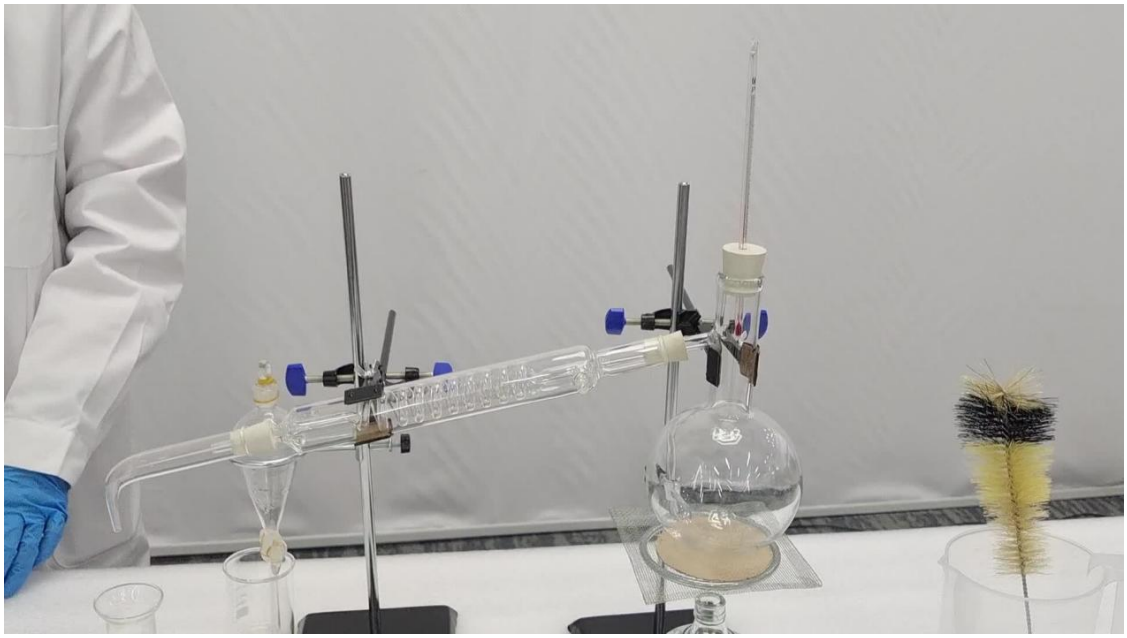

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	YHEO-3
Μέθοδος θέρμανσης	Λύχνος αλκοόλης
Τύπος φιάλης	Φιάλη απόσταξης